

ちょうのう 聴能だより

れいわ ねん がつ か だい ごう
令和6年6月3日 第2号
にいがたけんりつながおかるうがっこうしえんぶ
新潟県立長岡聾学校支援部
でんわ ちょうけんしつちよくつう
電話0258-38-0200 (聴検室直通)
tyounou@nagaokarou.nein.ed.jp

ことし ほんかくてき つ ゆ はじ きおん しつど たか ほちょうき じんこうないじ
今年もこれから本格的な梅雨のシーズンが始まります。気温も湿度も高くなり、補聴器や人工内耳の
こしょう ぶ きせつ
故障が増える季節です。

ほちょうき じんこうないじ たいてき あせ あせ ほちょうき じんこうないじ もっと にがて すいぶん えんぶん
補聴器や人工内耳の大敵は、『あせ』。汗には補聴器や人工内耳が最も苦手とする「水分と塩分」
りょうほう ぶく さび げんいん だいじ ほちょうき じんこうないじ なかも
の両方が含まれ、「錆」の原因になるからです。大事な補聴器や人工内耳を長持ちさせるために、ぜ
ひ、まいにち てい
ひ、毎日、こまめに手入れしてください。

つ ゆ ど き あ せ き せ つ 梅雨時は汗の季節です！

ほちょうき じんこうないじ てい
補聴器・人工内耳のお手入れは、

こまめにやりましょう！！

〈お手入れのポイントです〉

ポイント① 汗や水分は、タオル等でこまめにふく。

うんどう あと あせ あと あせ つか
運動の後など、汗をかいた後は、タオルでしっかりふきましょう。汗カバーを使っている
でんちしつないぶ あせ しんにゅう こうか
電池室内部に汗が浸入したときは、効果がありません。また、濡れたカバーを付けたままにし
ておくと、かえって故障しやすくなります。汗カバーが濡れたら交換してください。



ポイント② 補聴器をふいて、手入れをする。

まいにち ほちょうき はす かんそう い まえ かわ むの すいぶん えんぶん よご ぶ と
毎日、補聴器を外して乾燥ケースに入れる前に、乾いた布で水分や塩分、汚れを拭き取りまし
よう。補聴器、人工内耳は大事な音の入り口です。自分の耳です。大切にしましょう。

ポイント③ 補聴器を外したら、必ず乾燥ケースに入れる。
蓋はしっかり閉める。

ね まえ ほちょうき はす かなら かんそう かんそうき い かんそう でんち かんそう
寝る前など補聴器を外したら、必ず乾燥ケースか乾燥機に入れて乾燥させましょう。電池は乾燥
に弱いので、外してから入れましょう。乾燥剤の色のチェックも忘れずにしてください。

しつこらんろし いろ いろ
湿度検知紙の色は、「青色」がOK！！
ピンクになっていたら、交換してください。






ちょうのうしゅうかん 聴能週間①

6/24(月) ~ 28(金)

ねん2かいよてい ちょうのうしゅうかん かいめ がつ か げつ がつ にち きん ようちぶ おこな
年2回予定している聴能週間。1回目は6月24日(月)~6月28日(金)【幼稚部は6/11~19】に行います。
じぶん きこえや ほんちゅうき しゅく かんり ほうほう がしゅう ようじどうせいと みな ねんれい おう かくがくぶ
自分のきこえや、補聴器の仕組み、管理の方法を学習します。幼児児童生徒の皆さんの年齢に応じて、各学部の
けいかく とく けいかい ほんちゅうき てい みなお ひつよう ようぐ か ちょうりよく
計画で取り組みます。また、この機会に補聴器の手入れを見直して、必要な用具を買ったり、きこえルーム(聴力
そくていしつ みる こうかん じんこうないじ かた きかい こうかん
測定室)で古いチューブを交換したりしてください。人工内耳の方は、この機会にマイクロホンカバーを交換しましょ
う。

かんそうほかん ぼうかんだいさく しょうかい 乾燥保管ケース・防汗対策グッズの紹介

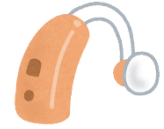

いまつか かんそう き め かんそうざい はい ほんちゅうき しっけ あせ まも
今使っている乾燥ケースには、効き目のある乾燥剤が入っていますか？補聴器を湿気や汗から守るための
かんそうき はんばい いちぶ しょうかい
乾燥機も販売されています。その一部をご紹介します。

リニュー・ドライヤー

(乾燥・消毒・滅菌・ACアダプター)

16,500円



※写真の補聴器は見本です
(商品に含まれません)

パーフェクトドライラックス

(乾燥・消毒・滅菌・ACアダプター)

9,900円

※取り寄せになるので
ネットでの購入が
おすすめです。



ドライ&ストア (乾燥・消毒・滅菌・保管)

グローバルⅡ

35,300円



ゼファー

22,000円



かんそう かんそう ほかん 乾燥ケース (乾燥・保管)

リオン 1,760円

マキチエ 1,000円



かんそうざい こけいまるがた 乾燥剤固形丸型 (リオン)

660円

かんそうざい こけいまるがた 乾燥剤固形丸型 (マキチエ)

600円

(脱臭シート付き)

ぼうかん 防汗カバー

リオン 660円

スパンデックス素材 2,750円 (2枚セット)



※価格は変更になっている可能性があります。

お知らせ・お願い

「補聴器・人工内耳・聞こえに関する調査」のご提出ありがとうございました。

コピーをとり、後日、返却いたします。聞こえのファイルに綴じてご家庭でも保管してください。

