

ちょうのう 聴能だより

れいわ ねん がつ か だい ごう
令和6年6月5日 第2号
にいがたけんりつながおかるうがっこうしえんぶ
新潟県立長岡聾学校支援部
でんわ ちょうけんしつちよくつう
電話0258-38-0200 (聴検室直通)
tyounou@nagaokarou.nein.ed.jp

ことし ほんかくてき つ ゆ はじ きおん しつど たか ほちょうき じんこうないじ
今年もこれから本格的な梅雨のシーズンが始まります。気温も湿度も高くなり、補聴器や人工内耳の
こしょう ぶ きせつ
故障が増える季節です。

ほちょうき じんこうないじ たいてき あせ ほちょうき じんこうないじ もっと になて すいぶん えんぶん
補聴器や人工内耳の大敵は、『あせ』。汗には補聴器や人工内耳が最も苦手とする「水分と塩分」
りょうほう ぶく さび げんいん たいじ ほちょうき じんこうないじ ながも
の両方が含まれ、「錆」の原因になるからです。大事な補聴器や人工内耳を長持ちさせるために、ぜ
ひ、まいにち てい
ひ、毎日、こまめに手入れしてください。



つ ゆ ど き あせ き せ つ
梅雨時は汗の季節です！

ほちょうき じんこうないじ てい
補聴器・人工内耳のお手入れは、

こまめにやりましょう！！



てい
〈お手入れのポイントです〉



ポイント① 汗や水分は、タオル等でこまめにふく。

うんどう あと あせ あと あせ つか
運動の後など、汗をかいた後は、タオルでしっかりふきましょう。汗カバーを使っている
でんちしつないぶ あせ しんにゅう こうか
電池室内部に汗が浸入したときは、効果がありません。また、濡れたカバーを付けたままにし
ておくと、かえって故障しやすくなります。汗カバーが濡れたら交換してください。

ポイント② 補聴器・人工内耳をふいて、手入れをする。

まいにち ほちょうき はす かんそう い まえ かわ むの すいぶん えんぶん よご ぶ と
毎日、補聴器を外して乾燥ケースに入れる前に、乾いた布で水分や塩分、汚れを拭き取りまし
よう。補聴器、人工内耳は大事な音の入り口です。自分の耳です。大切にしましょう。

ポイント③ 補聴器・人工内耳を外したら、必ず乾燥ケースに入れる。
蓋はしっかり閉める。

ね まえ ほちょうき はす かなら かんそう かんそうき い かんそう でんち かんそう
寝る前など補聴器を外したら、必ず乾燥ケースか乾燥機に入れて乾燥させましょう。電池は乾燥
に弱いので、外してから入れましょう。乾燥剤の色のチェックも忘れずにしてください。

しつどけんちし いろ あおいろ こうかん
湿度検知紙の色は、「青色」がOK！！ピンクになっていたら、交換してください。
じんこうないじ かんそうざい かげつ かい こうかんめやす
人工内耳の乾燥剤 ドライブリックは2ヶ月に1回が交換目安です。






ちょうのうしゅうかん 聴能週間①

6/22(月) ~ 26(金)

ねん2かいよてい ちょうのうしゅうかん かいめ がつ か げつ がつ にち きん おこな
年2回予定している聴能週間。1回目は6月22日(月)~6月26日(金)〈小中学部は6/15~19〉に行い
ます。自分のきこえや、補聴器の仕組み、管理の方法を学習します。幼児児童生徒の皆さんの年齢に応じて、
かくがくぶ けいかく とく きかい ほちょうき てい みなお ひつよう ようぐ か
各学部の計画で取り組みます。また、この機会に補聴器の手入れを見直して、必要な用具を買ったり、きこえルー
ム(聴力測定室)で古いチューブを交換したりしてください。人工内耳の方は、この機会にマイクロホンカバーを交換
しましょう。

かんそうほかん ぼうかんだいさく しょうかい 乾燥保管ケース・防汗対策グッズの紹介

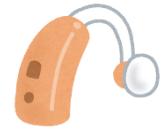

いまつか かんそう きめ かんそうざい はい ほちょうき しっけ あせ まも
今使っている乾燥ケースには、効き目のある乾燥剤が入っていますか？補聴器を湿気や汗から守るための
かんそうき はんばい いちぶ しょうかい
乾燥機も販売されています。その一部をご紹介します。

<p>ドライ&ストア (乾燥・消毒・滅菌・保管) グローバル II 35,300 円</p> 	<p>ゼファー 23,100 円</p> 
--	--

パーフェクト ドライ ラックス
(乾燥・消毒・滅菌・ACアダプター)
9,900 円

※取り寄せになるので
ネットでの購入が
おすすめです。



かんそうざい こけいまるがた 乾燥剤固形丸型 (リオン)	660 円
かんそうざい こけいまるがた 乾燥剤固形丸型 (マキチエ)	600 円
だっしゅう (脱臭シート付き)	
ドライブリック (エイド)	1980 円
じんこうないじょう (人工内耳用1パック3個入り)	

かんそう かんそう ほかん 乾燥ケース (乾燥・保管)	
リオン	1,760 円
マキチエ	1,000 円



※価格は変更になっている可能性があります。



お知らせとお願い

「補聴器・人工内耳・聞こえに関する調査」のご提出ありがとうございました。



コピーをとり、後日、返却いたします。聞こえのファイルに綴じてご家庭でも保管してくだ
さい。